


CE
0120

FORESEE LINE
S P R L

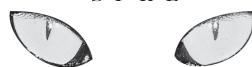

RUE DU MANY, 111
4100 SERAING - BELGIUM
TEL. : 32(0)475 86 86 35
FAX : 32(0)4 388 15 45
e-mail : info@foreseeline.com

"STAR'TEX" CONDOMS
Instructions

DESCRIPTION AND INDICATIONS

Transparent lubricated condom with teat.
"STAR'TEX" condoms are made from natural latex.
Lubricant: Non-spermicidal dimethylsilicone.
Each condom is electronically tested and individually packed.

If used correctly, "STAR'TEX" condoms are an effective contraceptive and a safe way of combating the spread of sexually transmitted diseases.
However, no condom can guarantee complete protection.

INSTRUCTIONS

- Carefully tear the packet where indicated, taking care not to catch the condom on any sharp or pointed objects (nails, rings etc.)
- The condom should be placed on the erect penis before any contact with your partner.
- Hold the condom by the teat (rounded, sealed end) between your thumb and index finger in order to expel any air.
- Unroll the condom fully over the erect penis.
- After ejaculation and while the penis is still erect, withdraw the penis whilst holding the condom at the base.
Avoid all contact between the penis, the used condom and the body of your partner.
- After use, wrap the used condom in paper and throw it in the bin.
- Condoms should only be used once. Never use the same condom more than once.

GENERAL INFORMATION

LUBRICATION: if you require additional lubrication, use a water-based lubricant, preferably "STAR'TEX" gel. Never use vaseline, handcream etc.

COMPATIBILITY: if you are having medical treatment for your reproductive organs, consult your doctor or pharmacist to make sure that the medication is compatible with the condom.

ALLERGIES: if you are allergic to latex, consult a doctor.

STORAGE: store at room temperature, never leave in direct sunlight or very hot places.

EXPIRY DATE: see packaging (Exp...). Do not

PRÉSERVATIFS "STAR'TEX"
Mode d'emploi

DESCRIPTION & INDICATION

Préservatif transparent, lubrifié, avec réservoir.
Les préservatifs "STAR'TEX" sont fabriqués à partir de latex naturel.
Lubrifiant : Diméthylsiliconum non spermicide
Chaque préservatif est testé électroniquement et emballé individuellement.

S'il est utilisé correctement, le préservatif "STAR'TEX" est un contraceptif efficace et un moyen sûr de lutter contre la propagation des maladies sexuellement transmissibles.
Toutefois, aucun préservatif ne peut garantir une protection absolue.

MODE D'EMPLOI

- Déchirer doucement l'emballage à l'endroit prédécoupé en faisant attention aux objets coupants ou pointus (ongles, bagues ...etc)
- Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact avec le partenaire.
- Tenir le préservatif par le réservoir (bout arrondi du côté fermé) entre le pouce et l'index afin d'en chasser l'air.
- Dérouler complètement le préservatif sur le pénis en érection.
- Après l'éjaculation et avant la fin de l'érection, se retirer en retenant le préservatif sur la base du sexe.
Eviter tout contact entre le pénis, le préservatif usagé et le corps du partenaire.
- Après utilisation, emballer le préservatif usagé dans un papier et le jeter à la poubelle.
- Le préservatif est à usage unique, ne jamais utiliser un même préservatif plusieurs fois.

GENERALITES

LUBRIFICATION : si l'on souhaite une lubrification supplémentaire, utiliser un lubrifiant à base d'eau, de préférence le gel "STAR'TEX". Jamais de vaseline, crème pour les mains ..., etc.

COMPATIBILITE : en cas d'utilisation d'un médicament pour les organes sexuels, consulter le médecin ou le pharmacien pour s'assurer que ce médicament est compatible avec le préservatif.

ALLERGIE: en cas d'allergie au latex, consulter un médecin.

CONSERVATION : conserver à température ambiante, ne jamais laisser exposé en plein soleil ou dans des endroits surchauffés.

DATE LIMITE : est indiquée sur l'emballage

PRESERVATIVOS "STAR'TEX"
Modo de empleo

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Preservativo transparente, lubricado, con depósito.
Los preservativos "STAR'TEX" están fabricados con látex natural.
Lubricante: Dimetilsilicona no espermicida
Cada preservativo está electrónicamente comprobado y envasado individualmente.

Si se utiliza correctamente, el preservativo "STAR'TEX" constituye un contraceptivo eficaz y un medio para luchar contra la propagación de las enfermedades de transmisión sexual.
De todas formas, ningún preservativo puede garantizar una protección absoluta.

MODO DE EMPLEO

- Abra con precaución el envase por el lado marcado, teniendo cuidado con los objetos cortantes o puntiagudos (uñas, anillos, etc...)
- El preservativo debe colocarse sobre el pene en erección antes de cualquier contacto con la pareja.
- Sostener el preservativo por el depósito (bolsa redondeada del extremo cerrado) entre los dedos pulgar e índice para expulsar el aire del mismo.
- Desenrolle completamente el preservativo sobre el pene en erección.
- Después de la eyaculación y antes de que cese la erección, retirese sujetando el preservativo por la base del miembro.
Evite cualquier contacto entre el pene, el preservativo usado y el cuerpo de su pareja.
- Después de usarlo, envuelva el preservativo en un papel y arrójele a la basura.
- El preservativo es de un solo uso, jamás utilice el mismo preservativo más de una vez.

GENERALIDADES

LUBRICACIÓN: si desea lubricación adicional, utilice un lubricante hidratado, preferentemente el gel "STAR'TEX". Nunca utilice vaselina, ni crema para las manos, etc...

COMPATIBILIDAD: en el caso de que esté usando algún medicamento para los órganos genitales, consulte su médico o farmacéutico para estar seguro de que dicho medicamento es compatible con el preservativo.

ALERGIA: en caso de alergia al látex, consulte a un médico.

CONSERVACIÓN: consérvese a temperatura ambiente. No exponer nunca al sol ni almacenar en lugares excesivamente calurosos.

FECHA DE CADUCIDAD: está indicada en el

"STAR'TEX" CONDOOMS
Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING & AANWIJZINGEN

Transparante condoms met glijmiddel en reservoir.
De "STAR'TEX" condoms zijn gemaakt uit natuurlijke latex.
Glijmiddel : niet zaaddodend dimethylsiliconum.
Elk condoom is elektronisch getest en afzonderlijk verpakt.

Wanneer het correct wordt gebruikt, is het "STAR'TEX" condoom een doeltreffend voorbehoedsmiddel en een veilige bescherming tegen de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen.
Geen enkel condoom kan echter een absolute bescherming garanderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Scheur de verpakking voorzichtig op de perforatie en pas op voor scherpe of snijdende voorwerpen (nagels, ringen, ...).
- Het condoom moet op de penis in erectietoestand worden geplaatst voor er contact is met de partner.
- Neem het condoom tussen duim en wijsvinger vast bij het reservoir (afgeronde kop aan de gesloten zijde) om er de lucht uit te halen.
- Rol het condoom volledig af over de penis in erectietoestand.
- Na de ejaculatie en voor het einde van de erectie moet de man zich terugtrekken terwijl hij het condoom vasthoudt aan de basis van het geslachtsorgaan.
Vermijd elk contact tussen de penis, het gebruikte condoom en het lichaam van de partner.
- Verpak het condoom na gebruik in een papiertje en werp het in de vuilnisbak.
- Het condoom is bestemd voor eenmalig gebruik. Gebruik hetzelfde condoom nooit meer dan één keer.

ALGEMENE KENMERKEN

GLIJVERMOGEN : Als u extra glijvermogen wilt, gebruik dan een glijmiddel op waterbasis, bij voorkeur de "STAR'TEX" gel. Gebruik nooit vaseline, handcrème, ...

VERENIGBAARHEID : Wanneer u een geneesmiddel voor een aandoening aan de geslachtsorganen inneemt, moet u a de geneesheer of de apotheker raadplegen om na te gaan of dit geneesmiddel samen met het condoom gebruikt mag worden.

ALLERGIE: Indien u allergisch bent voor latex, moet u een geneesheer raadplegen.

BEWARING : Bewaren bij kamperatuur, nooit blootstellen aan rechtstreeks zonlicht en nooit op een te warme plaats bewaren.

UITERSTE VERBRIJSDATUM : Staat vermeld op de verpakking (Exp...). Na deze datum mag u de